

SMARTES FÜR DENTALLABORE UND ZAHNARTZPRAXEN



Das weltweit komplexeste Angebot an Verbrauchsmaterialien
mit einer außergewöhnlichen Qualität.

ARUM Implantat-Prothetik- Komponenten



ARUM

Auflistung der Verbrauchsmaterialien


Neue System werden regelmäßig aktualisiert und eingepflegt.
Lassen Sie sich überzeugen in unserem Online-Shop.
www.arumdentalshop.com

A series	Kompatibel mit	E series	Kompatibel mit	N series	Kompatibel mit
AB-IH	Alpha-Bio Tec® Internal Hex	EB	EBI®	NEB	NEOBIOTECH®
AD-CLOS	ADIN® CLOSEFIT™	EU-AT	EUROTEKNIKA™ Aesthetica	NED-CM	NEODENT®CM
AD-TOU	ADIN® TOUAREG™ S&OS	EU-IN	EUROTEKNIKA™ Internal Naturactis/Naturall+/Natea+	NED-EXT	NEODENT® EXTERNAL
AN	ANTHOGYR® Axiom	G series	Kompatibel mit	NED-GM	Neodent® GM
AT-EV	ASTRA TECH™ OsseoSpeed™ EV	GLD-TEK	Global D® Tekka® In-Kone®	NOS-PA	NEOSS Pro Active®
AT-EVPRO	ASTRA TECH™ OsseoSpeed™ Profile EV	H series	Kompatibel mit	NB-ACT	NOBEL BIOCARE® Active™
AT-OSS	ASTRA TECH™ OsseoSpeed™ TX	HMT-RA	HumanTech RATIO	NB-BRA	NOBEL BIOCARE® Branemark®
B series	Kompatibel mit	I series	Kompatibel mit	NB-REP	NOBEL BIOCARE® Replace Select™
BEG	BEGO®	ID-LEG	IMPLANT DIRECT® Legacy™	NCOS	NucleOSS
BIC	BICON® Integra-CP™	ID-IAT	IMPLANT DIRECT® Inter Active	O series	Kompatibel mit
BH-EXT	BIOHORIZONS® External®	ID-SAT	IMPLANT DIRECT® Swish Active	OST-GS	OSSTEM® GS(TS)
BH-INT	BIOHORIZONS® Internal®	ID-PLU	IMPLANT DIRECT® Swish Plus	OST-SS	OSSTEM® SS
BM3I-INT	BIOMET 3i® Certain®	ID-TRI	IMPLANT DIRECT® Tri Lobe	OST-US	OSSTEM® US
BM3I-EXT	BIOMET 3i® EXTERNAL	IL-GB	INTRA-LOCK® GOLD&BLUE™	P series	Kompatibel mit
BT-BIK	BIOTECH®	J series	Kompatibel mit	PLT-IV	PLATON® Type IV Pro
BB-MYT	BrainBase Corporation® MYTIS Arrow Implant	JD-EV	J DENTAL CARE® JD EVOLUTION®	S series	Kompatibel mit
BRM-SK	BREDDENT Medical SKY®	JD-ICO	J DENTAL CARE® JD Icon®	SHN	SHINHUNG®
BT-INT	BTI INTERNA®	JD-OCT	J DENTAL CARE® JD EVOLUTION® Octa	SC-INV	SIC Invent®
BT-ENT	BTI EXTERNA®	JD-EVP	J DENTAL CARE® JD EVOLUTION® Plus	SI-DC	SOUTHERN IMPLANTS Deep Conical
C series	Kompatibel mit	K series	Kompatibel mit	SI-MSC	SOUTHERN IMPLANTS MSc External Hex
CAM	CAMLOG®	KENT	KENTEC®	SI-INT	SOUTHERN IMPLANTS M-Series (Internal Hex)
CL-CON	CLC Conic	KS-PRI	KEYSTONE Prima Connex®	SI-TRI	SOUTHERN IMPLANTS Tri Nex
CON	CAMLOG® CONELOG®	KYO-FBL	KYOCERA FINESIA® Bone Level	STR-BL	STRAUMANN® Conical Bone Level®
CRT	CORTEX™	KYO-PO	KYOCERA PoieX	STR-TL	STRAUMANN® synOcta®
CTE-EST	C-TECH® Esthetic Line	L series	Kompatibel mit	SM-PK	Sweden&Martina Premium Kohno
CWM-INT	COWELLMEDI® INNO Internal	LSK-BIO	LASAK Bioniq®	SM-SH	Sweden&Martina Shelta
D series	Kompatibel mit	M series	Kompatibel mit	SM-PM	Sweden&Martina Prama
DP	DEEP®	MM-IC	Medentis Medical® ICX	T series	Kompatibel mit
DR-TIO	Dentaurum tioLogic®	MEG	MEGAGEN®	TN-EXT	TITANIUM Fix External
DTS-ICL	DENTIS® i-Clean	MEG-ONE	MEGAGEN® AnyONE	THO-SPI	THOMMEN SPI®
DTS-SCL	DENTIS® s-Clean	MEG-RID	MEGAGEN® Anyridge	TR-NI	TRI® Narrow Implants
DTM-NR	DENTIUM® NR Line	MEG-EEP	MEGAGEN® Anyridge® Extra EZ POST	TR-OCT	TRI® Octa
DTM-SIM	DENTIUM® SimpleLine	MEG-EZP	MEGAGEN® EZ Plus	TR-VN	TRI® Vent
DTM-SPL	DENTIUM® SuperLine	MEG-MIN	MEGAGEN® Mini	W series	Kompatibel mit
DS-ANK	DENTSPLY® Ankylos® C/X Implant	MEG-RES	MEGAGEN® Rescue	WAR-ONE	WARANTEC® Oneplant
DS-XIV	DENTSPLY® XIVE	MS-C	MIS® C1	Z series	Kompatibel mit
DO-SM	DIO® SM	MS-INT	MIS® Internal Hexagon	ZIA	ZIACOM®
DO-UF	DIO® UF I & II Internal Submerged			ZMR-EZT	ZIMMER® Eztetic
DO-UFNS	DIO® UF II Internal Non Submerged			ZMR-SP	ZIMMER® Swiss Plus
DYN-PUS	DYNA Pushin Octalock			ZMR-SPA	ZIMMER® Spline A
				ZMR-SPB	ZIMMER® Spline B
				ZMR-TSV	ZIMMER® Tapered Screw-Vent®

ARUM Dental Online Shop

- Ti-Basis, Laboranalog, vorgefräster Rohling/Premillblank, Klinische Schraube, Scanbody, Werkzeuge & Teile von Dental CAD/CAM Material
- Über 500 kompatible Implantatsysteme
- Mehr als 3.000 Produktkomponenten
- Einfache Produktsuche durch Multi-Filterung
- EN/DE/FR 3-Sprachunterstützung im Online-Shop
- Mobiler Shop verfügbar - iOS / Android

www.arumdentalshop.com

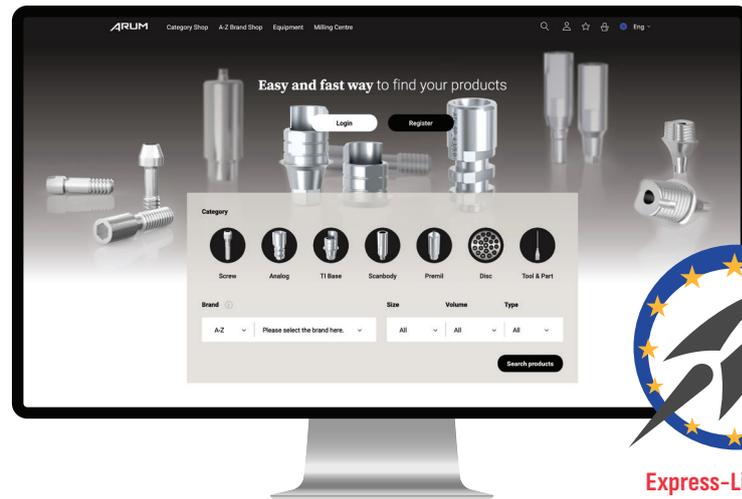

Express-Lieferung
Bestellungen bis 14:30 Uhr (CET),
Versand am gleichen Tag

Anwendung des ARUM Dental Shops

*Dental-Shop APP
per Knopfdruck!*




Download App Here!



Abgewinkelte Ti-Base


- Rohmaterial Ti 6Al-4V ELI (ASTM F 136) geliefert aus Deutschland
- Branchenweit größte Kompatibilität der Implantatsysteme
- Biokompatibilität auf überragendem Niveau
- Ausgezeichnet hohe Ermüdungsfestigkeit

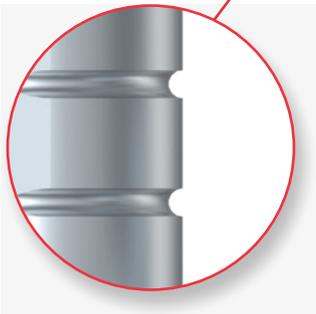


Externe Retention für mehr Zementhaftung



Die Oberfläche der Schnittseite und die Oberfläche des Sechskantteils auf dem Bild sind gleich ausgerichtet

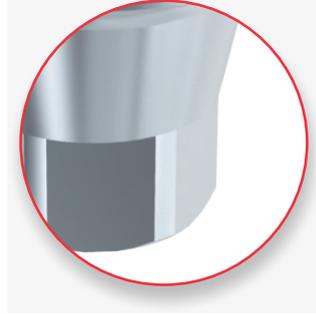

Präzisionsgefertigt bis zu $\pm 5\mu\text{m}$

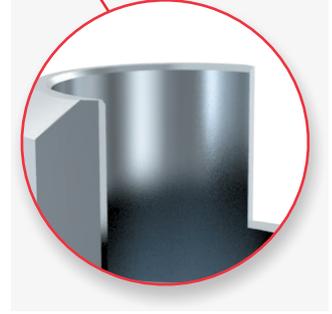

Verhinderung der Rotation von Zircon

2 Schrauben
Inklusive



Klinische gerade Schraube

Angelehnt an die Originalschraube



Abgewinkelte Schraube

- Rohmaterial Rostfreier Stahl 303F
- Branchenweit größte Kompatibilität der Implantatsysteme
- Präzisionsgefertigt bis zu $\pm 5\mu\text{m}$
- Für 3D-Druck & Gipsmodell

ARUM Identifikationscode

compatible with
NOBEL BIO CARE® Active™ RP 4.3/5.0


ATV-RP-43/50



Gipsmodell




3D Druckmodell

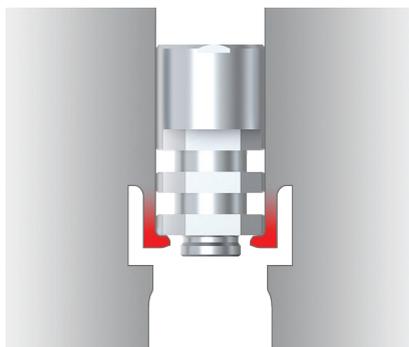

**3D Druckmodell
mit Klick-System**

Positionsanzeiger
3D-Druck Modell &
Gipsmodell

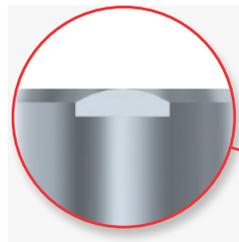

Verdrehschutz



Einbringstopp für
3D-Druck Modelle und
Gipsmodelle



Vorgefräster Rohling

- Rohmaterial Ti 6Al-4V ELI (ASTM F 136) geliefert aus Deutschland
- Branchenweit größte Kompatibilität der Implantatsysteme
- Sicherstellung der Qualität durch umfassende Prüfung
- präzisionsgefertigt bis zu $\pm 5\mu\text{m}$
- Durchmesser 10mm, 14mm

2 klinische Schrauben inklusive

- Angelehnt an das originale Schraubendesign




Durchmesser 10mm,14mm

Wir bieten Durchmesser von 10 und 14 mm an, damit Sie individuelle Abutments für verschiedene anatomische Gegebenheiten anfertigen können.

Da sie mit mehr als 700 Implantatsystemen kompatibel sind, können Sie diese auch mit ARUM-Frässystemen bearbeiten.

Attachement

Mit Hilfe von Attachments können Sie anspruchsvollere und nahezu perfekte individuelle Abutments herstellen.

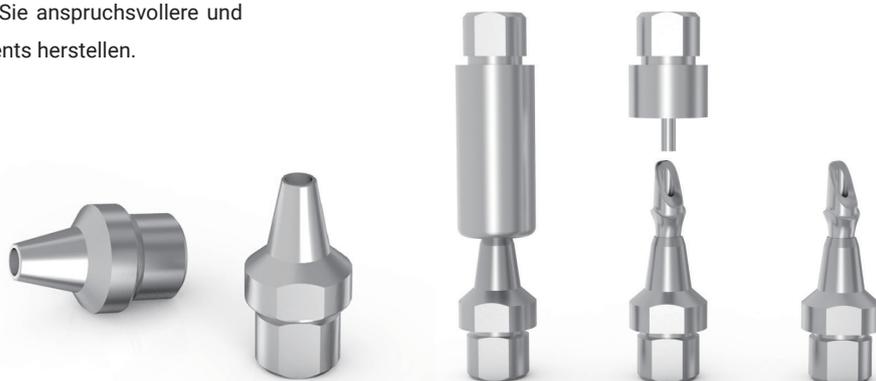


- Rohstoffe Ti 6Al-4V ELI (ASTM F 136) aus Deutschland geliefert
- Genauer Indikator für die Anziehungskraft "A-Linie"
- Einfaches und schnelles Scannen von Daten
- Minimaler Druck auf das Zahnfleisch und Sicherung des Zahnfleisches



A Line


Indizes zur präzisen Lage und Befestigung von Implantatzubehör und oralen Scan-Körpern und zur Vermeidung der Rotation von individuellen Abutments.

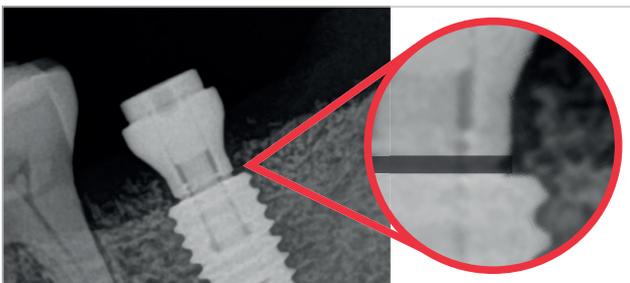

Einfaches und Genaues Matchen

Einfacher und genaue Übertragung von Scandaten und Bibliothek in die CAD-Software.

Der genauere Abgleich erfolgt durch die eingebrachte Abschrägung, der eingelassenen Nute und der vorhandenen Stufe.

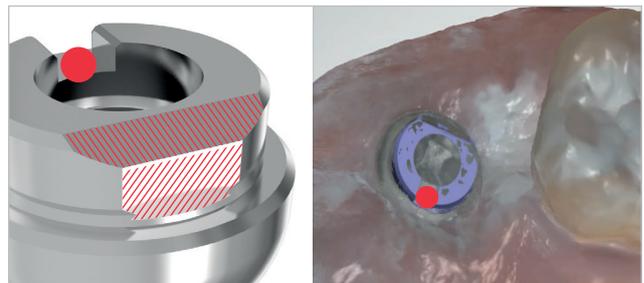


Konkaver Verlauf

Konkave Linie zur vereinfachten Positionierung des Scanbody durch den Behandler.

Minimierung des gingivalen Drucks

Fixierung von der Gingiva bei tief inserierten Implantaten.

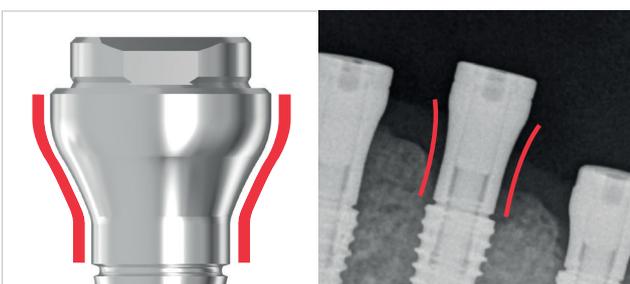

Halteaufnahme für den Healing-Scanbody

Einfache Verbindung zur Halterungsaufnahme mit intraoralem Scankörperhalter.

Er eignet sich gut für komplexe Fälle wie Molarenbehandlungen.

Es besteht die Möglichkeit, für jede Mundsituation eine geeignete Größe zu wählen.



Modell / Intraoraler Scankörper

- Rohmaterial rostfreier Edelstahl 303F
- Unterstützt die größte Anzahl von Implantatsystemen und Bibliotheken der Dentalbranche



Kostenlose Implementierung der Bibliothek in Ihre Datenbank per TeamViewer

Das technische Support -Team von ARUM wird die Bibliotheksdateien über eine Remote-Verbindung sicher auf Ihrem PC einrichten, damit Sie sofort mit dem Designen beginnen können.

800+ Implantat-Verbindungen

exocad

3shape


dental wings

**Hohe
Genauigkeit**




WARUM
sind unsere ARUM Scanbodies aus
METALL?

Im Vergleich zu PEEK kann man sich immer auf die außergewöhnliche Präzision und die unvergleichliche Verschleißfestigkeit des Metall-Scankörpers verlassen.

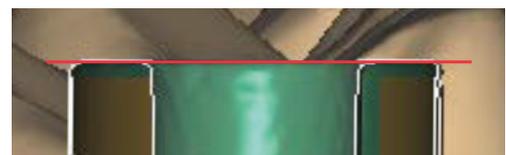

Arum Metal Scanbody

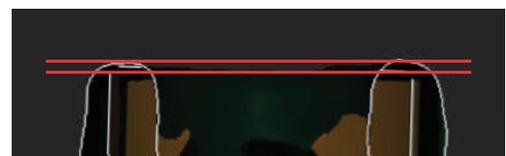

PEEK / Soft Material Scanbody

Schraube

- Rohstoffe Ti 6Al-4V ELI (ASTM F 136) aus Deutschland geliefert
- Kontrolle des Gewindes von Hand
- Branchenweit größte Kompatibilität der Implantatsysteme
- Präzision und Intensität durch Ausleuchtung
- Überprüfung mit 150% des ursprünglichen Drehmoments
- Angelehnt an das originale Schraubendesign



Klinischer Schraubendreher

- Verwendung von Trimrit mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit
- leichte und einfache Reinigung
- für abgewinkelte Schraubenkanäle
- Wärmebehandelt mit einer Härte über 50



Klinischer Schraubenzieheraufsatz mit ISO-Anschluss für Ratsche

Ball Torx - 25mm



Ball Hex - 25mm

Laborschraubenzieher



Schraubendreher Aufsätze

- Einsetzen des Modell-Scankörpers und des Abutments
- 10 unterschiedliche Aufsätze (kompatibel mit verschiedenen Implantatsystemen)



Analog Einbringhilfe

- Platzieren Sie das Laboranalog auf dem 3D-Druckmodell
- Einfaches und sicheres einbringen des Laboranalog
- Verhindert die Beschädigung des Innengewindes des Laborimplantats
- 5 unterschiedliche Aufsätze (kompatibel mit verschiedenen Implantatsystemen)



Drehmomentadapter


- Bei der konnektorlosen Bearbeitung von Premill-Blanks ist der Drehmomentadapter hilfreich, um problemlos mit dem geeigneten Drehmoment das Premill mit einem Attachent zu verschrauben, unter Berücksichtigung des definierten Drehmoment von (mit 0,4Nm)
- Verhindert das Lösen der Schraube beim Fräsvorgang.



Schraubenzieheraufsatz Sortiment

SIZE	COLOR	Kompatibles Implantatsystem
 Hex 1.0	Blue	DENTIUM® NR Line / DENTSPLY® Ankylos® C/X Implant etc
 Hex 1.2	Purple	ADIN® TOUAREG™ S&OS/ANTHOGR ANTHOFIT / BIOMET 3i®Certain/ BIOMET 3i® EXTERNAL HEX / BTI INTERNAL® / COWELLMEDI® INNO Internal / DENTIS® i-Clean / DENTSPLY® Xive® / DIO®UF / Global D® Tekka® In-Kone / MEGAGEN® AnyONE / MEGAGEN® Anyridge® / MEGAGEN® Anyridge® MEGAGEN®Extra EZ POST / MEGAGEN® EZ Plus / MEGAGEN® Rescue /NEOBIOTECH® / OSSTEM® GS(TS) /OSSTEM® SS / OSSTEM® US / SHINHUNG® / SIC Invent®/SOUTHERN IMPLANTS MSc EXTERNAL HEX / WARANTEC®Oneplant etc
 Hex 1.25	Black	BEGO® Semados/ BIOHORIZONS® External® / BIOHORIZONS® Internal® / DENTIS® s-Clean / LASAK Bioniq® etc.
 Hex 1.27	Red	ANTHOGR AXIOM/Alpha-Bio Tec®Internal Hex / ASTRA TECH™ OsseoSpeed™ TX /CAMLO®CAMLO®/ CAMLOG®CONELOG® / CORTEX™ / DEEP® / DENTIUM® SimpleLine /DENTIUM® SuperLine / EBI®/ IMPLANT DIRECT®Legacy™ / MIS® C1 / MIS®Internal Hexagon./ ZIMMER®Spline A / ZIMMER®Spline B / ZIMMER®Tapered Screw-Vent® etc.
 Hex 1.3	Green	ASTRA TECH™ OsseoSpeed™ EV / CLC Conic / DYNA Pushin Octalock® / KENTEC® / PLATON® Type IV Pro / Sweden & Martina etc
 Torx 1.7	Brown	STRAUMANN® Bone Level ® / STRAUMANN® ConicalBone Level ® / STRAUMANN® synOcta® etc.
 Torx 1.5 (Star)	Yellow	ADIN® CLOSEFIT™ / NOBEL BIOCARE® Active™ / NOBEL BIOCARE® Branemark ® / NOBEL BIOCARE® Replace Select™ / NEOSS Pro Active® etc.
 Cross	Gray	THOMMEN SPI® etc
 Ball Torx	Orange	1. Most of angled screws of ARUM Ti-base (screw head size should be more than 2.1mm) 2. ALL IMPLANT SYSTEM FOR DISK ANGULATED SCREW CHANNELS
 Ball Hex	White	Some of angled screws of ARUM Ti-base (screw head size should be less than 2.1mm) *Please visit our website to see the list.

Analog-Einbringhilfe Sortiment

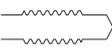SIZE	COLOR	Kompatibles Implantatsystem
 M2.0*P0.40	Cocoa	Osstem GS Regular, Dentium Super line, Megagen Anyone, Dentis S-clean, Straumann Tissue level, etc.
 M1.8*P0.35	Light Green	Zimmer TSV, Megagen Anyridge, Biohorizon Internal, Bego Semados, etc.
 M1.6*P0.35	Pink	Straumann Bone level, Osstem GS Mini, Nobel biocare Active Mini, Dentsply Xive, Neodent GM, etc.
 M1.4*P0.30	Sky Blue	Straumann Bone level 2.9, Dio UF Narrow, Megagen Mini, Astra YellowMost of Multi unit, etc.
 M2.5*P0.45	Ivory	Osstem US Wide, Nobel biocare Branemark WP, etc.

** Bitte beachten Sie die Farbe der Spitzen.
** Wenden Sie sich an uns, um eine vollständige Auflistung der Implantatkompatibilität zu erhalten.

Torque Adapter

Torque	0.4 Nm
--------	--------

WIR TEILEN DIE ERFAHRUNG
mit
PERFEKTION

KONTAKTIEREN SIE UNS

Arum Europe GmbH

Am Kronberger Hang 2
65824 Schwalbach am Taunus
Germany

+49 (0)6196 9695 675(6)
info@arumeurope.com
www.arumdentalshop.com

Arum 3D Solutions Ltd.

26C Lyon Road Walton-on-Thames
KT12 3PU
United Kingdom

+44 (0)207 388 1390
info@arumdental.com
www.arumdental.com



QR-Code für den
WhatsApp Chat.